


firefly **Splashy**

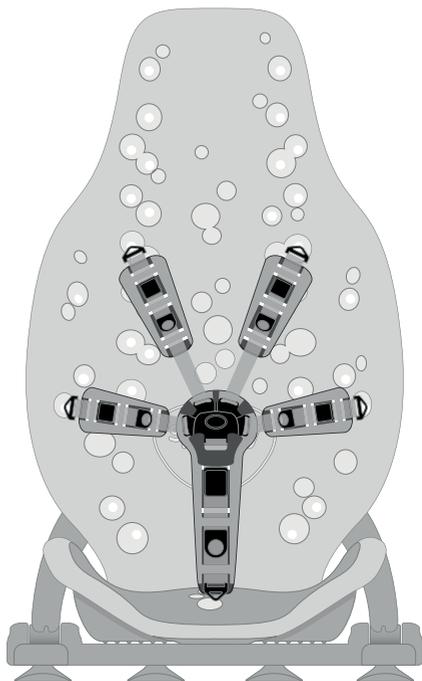

User Manual

Splashy Benutzeranleitung
Manual de usuario de Splashy
Manuale d'Uso Splashy
Manual do Utilizador Splashy
Mode d'emploi du Splashy

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le Splashy. Vous pouvez également télécharger ces instructions sur notre site web **www.fireflyfriends.com** ainsi que des vidéos, des schémas et d'autres renseignements utiles.

Sommaire

01 Usage prévu	p.153
02 Déclaration de conformité	p.154
03 Conditions de garantie	p.154
04 Consignes de sécurité	p.155
05 Consignes de nettoyage et d'entretien	p.156
06 Inspection et maintenance du produit	p.158
07 Recommandations importantes	p.159
08 Réutilisation des produits Firefly	p.159
09 Instructions d'utilisation	p.160
10 Informations sur la taille	p.180

SECTION 01: Usage prévu

Le siège de bain Splashy est destiné à des enfants handicapés qui ont besoin d'un soutien au niveau de la tête et du tronc pendant l'utilisation de la baignoire. **Pour un maintien stable et sûr, il est essentiel que le Splashy reste attaché en permanence à son support de base.**

Le Splashy est conçu pour des enfants âgés de 1 à 8 ans environ et dont le poids ne dépasse pas 30 kg.

Le Splashy se compose de 3 parties principales : le dossier, l'assise et le support de base. Vous recevrez également un kit de soutien comprenant un harnais 5 points et 4 cales de soutien pouvant être placées n'importe où sur le siège où un maintien est nécessaire (par ex. repose-tête ou pommeau).

Le dossier, l'assise et le support de base doivent pouvoir s'assembler facilement et de façon sûre - voir Section 09 de ce manuel pour de plus amples informations.



Les enfants ne doivent jamais rester seuls/sans surveillance dans leur siège de bain Splashy car ils pourraient se noyer ou se blesser.

Nous recommandons qu'un adulte procède à l'inspection du produit conformément à la Section 06 de ce manuel afin de s'assurer que le produit peut être utilisé en toute sécurité. Firefly Friends Ltd. et James Leckey Design Ltd. déclinent toute responsabilité si le produit n'est pas utilisé selon l'usage auquel il est destiné. En cas de doute, contactez le Service Clientèle de Firefly au 0800 318265 (R.-U.) ou 1800 626020 (Irlande).

Les activités journalières testées et approuvées par Firefly Friends Ltd. et James Leckey Design Ltd. sont :

1. Dans la baignoire ou la douche
2. Pour les activités ludiques dans l'eau

L'utilisation du Splashy en dehors de la salle de bain (dans le jardin, à la plage, etc.) doit être préalablement évaluée. Ne pas oublier que le Splashy contient des pièces de raccordement du siège à la base qui pourraient être affectées par de petites particules et/ou obstructions (terre, herbe, sable, etc.). Si le Splashy entre en contact avec une quelconque substance qui pourrait affecter les pièces de raccordement du siège à la base, s'assurer qu'elles sont bien rincées après utilisation. Reportez-vous à la Section 04 pour les consignes de sécurité et à la Section 05 pour de plus amples conseils sur le nettoyage et l'entretien.

SECTION 02 : Déclaration de conformité

James Leckey Design Ltd., en sa qualité de fabricant et sous sa propre responsabilité, déclare que le Splashy est conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Le Splashy a reçu le marquage CE en tant que dispositif médical de classe 1.

SECTION 03: Conditions de garantie

La garantie relative au Splashy s'applique uniquement si le produit est utilisé selon les besoins prévus, suivant l'ensemble des recommandations du fabricant. Ce produit fabriqué par James Leckey Design Ltd. bénéficie d'une garantie d'un an.

Les marchandises peuvent nous être retournées dans le cadre de la garantie de 12 mois en vue de réparation ou d'échange. Dès que vous nous contactez, nous prenons les dispositions nécessaires pour récupérer les marchandises à nos frais, procédons à leur réparation ou remplacement à réception de celles-ci et vous les retournons dans un délai de 14 jours. Dans tous les cas, il incombe au client de s'assurer que les marchandises à retourner sont correctement emballées, de préférence dans leur emballage d'origine.

SECTION 04: Consignes de sécurité

1. Toujours lire toutes les consignes avant la première utilisation.
2. L'enfant utilisant ce produit ne doit jamais rester seul/sans surveillance.
3. En cas d'utilisation du Splashy à la plage, ne jamais laisser votre enfant seul au bord de la mer.
4. Avant utilisation, vérifier que tous les composants du Splashy sont correctement assemblés selon les instructions. Le Splashy doit être fixé en permanence sur le support de base et placé sur une surface stable et ferme. Ne jamais utiliser le Splashy sur un plan incliné.
5. Le poids utilisateur maximum pour le Splashy est de 30 kg. Celui-ci ne doit jamais être dépassé.
6. Le Splashy contient des composants susceptibles de présenter un risque d'étouffement pour les petits. Vérifier que tous les composants sont fixés de manière sécurisée avant utilisation, y compris les dispositifs à bascule et les sangles.
7. Ne pas modifier le Splashy et ne jamais utiliser avec celui-ci des composants autres que ceux agréés Firefly. Cela pourrait mettre votre enfant en danger et annuler la garantie.
8. Lors de l'utilisation du Splashy dans des environnements où la présence de terre, de sable, d'herbe ou de particules est possible, toujours s'assurer de bien nettoyer les raccords du siège à la base après utilisation afin d'éviter toute obstruction. Pour remonter le siège sur la base, reportez-vous à la Section 09.2.6
9. Après utilisation, laisser sécher complètement le Splashy avant de le ranger avec soin. Le Splashy doit être tenu à l'écart de toutes sources de chaleur directe, notamment des flammes nues, cigarettes, radiateurs électriques et à gaz.
10. Nettoyer régulièrement le produit, conformément à la Section 05 de ce mode d'emploi.
11. Procéder régulièrement à des contrôles de maintenance afin de vérifier que le produit est en bon état de marche. Le Splashy ne doit pas être utilisé en cas de pièces défectueuses.
12. En cas de doute concernant l'utilisation sûre du Splashy ou du support de base, ou de défaillance de toute pièce, cesser immédiatement de l'utiliser et contacter le service d'assistance clientèle de Firefly au 0800 318265 (R.-U.) ou 1800 626020 (Irlande)
13. Tout élément promotionnel fourni avec le Splashy ne doit pas être utilisé sans surveillance.



Le non-respect de ces instructions peut mettre l'enfant et/ou vous-même en danger.

SECTION 05 : Consignes de nettoyage et d'entretien

Comment entretenir le produit

- Lors du nettoyage du Splashy, nous vous recommandons d'utiliser uniquement de l'eau chaude et un détergent non abrasif. Ne jamais utiliser de solvants organiques ni de produits liquides pour le nettoyage à sec.
- Ne pas laver les composants en mousse du Splashy au lave-linge ni avec un nettoyeur vapeur car la mousse pourrait se déformer.
- Nous vous déconseillons d'utiliser tout type de lotions médicamenteuses prescrites dans l'eau durant le bain car cela pourrait contribuer à la décomposition des matériaux du Splashy.
- Éliminer tout résidu ou poussière sur les parois de la baignoire avant d'y installer le support de base, en vérifiant que les pieds en caoutchouc adhèrent fermement à la baignoire.
- Pour enlever le sable, la terre, l'herbe ou les petites particules susceptibles de se trouver dans les raccordements du siège à la base, il suffit de tapoter légèrement pour les faire tomber. Rincer abondamment pour éliminer toute trace de particule à l'intérieur des raccords. Pour les blocages tenaces sur le support de base, il est possible de pousser le loquet du pouce pour faciliter le dégagement des particules.

- Si le siège de bain a été en contact avec de l'eau de mer, rincer abondamment toutes les pièces à l'eau claire.

Harnais 5 points

Le harnais 5 points Splashy peut être enlevé et nettoyé avec de l'eau savonneuse.

Support de base


1. S'assurer que le dessous du support de base est nettoyé après chaque utilisation pour garantir une bonne adhésion dans la baignoire.
2. Pour un nettoyage quotidien, utiliser de l'eau avec du savon.
3. Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer le support de base.

Assise, dossier et soutiens en mousse du Splashy


1. Pour un nettoyage quotidien, utiliser de l'eau avec du savon.
2. Les housses en mousse EVA peuvent être enlevées et lavées périodiquement pour empêcher l'accumulation de résidus et de saletés.

Les housses en mousse EVA du Splashy peuvent être enlevées et lavées tous les deux mois.





1. Les housses EVA s'attachent à l'aide de huit crochets. Deux sur le dossier et six sur l'assise.
2. Détacher tous les crochets à la main (ne pas utiliser d'outils).
3. Laver avec de l'eau savonneuse.
4. Vérifier que les housses sont complètement sèches avant de les remettre en place.
5. S'assurer que tous les crochets sont enclenchés lors de la remise en place des housses.

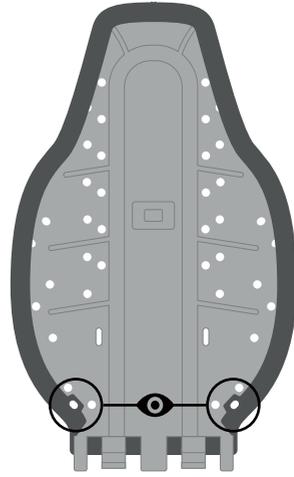

Emplacement des crochets

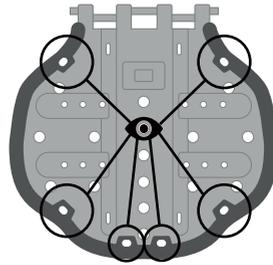

Si le Splashy est utilisé en dehors de la salle de bain (à la plage ou au jardin, par exemple), il est important de le rincer après chaque utilisation de sorte qu'il soit exempt de toute particule/ obstruction qui pourrait affecter ses mécanismes de fonctionnement. Pour remonter le siège sur la base, reportez-vous à la Section 09.2.6

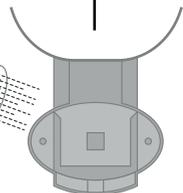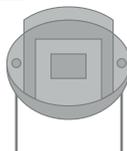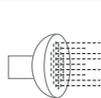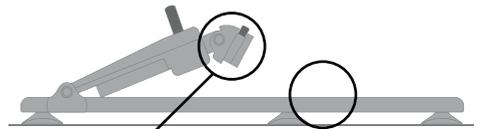

SECTION 06: Inspection et maintenance du produit

Nous recommandons de procéder aux divers contrôles du Splashy afin de garantir une utilisation sûre du produit.

Les contrôles recommandés sont énumérés ci-dessous :

1. S'assurer que le dossier et l'assise du Splashy ont été **assemblés de manière sécurisée** selon les indications en Section 09 de ce manuel.
2. Vérifier que le Splashy est **correctement fixé sur le support de base** et s'assurer qu'il est stable et fermement maintenu dans la baignoire avant d'y placer l'enfant.
3. S'assurer que le harnais 5 points et les cales de soutien sont **fermement attachés** au Splashy à l'aide des leviers de fixation.
4. Vérifier s'il y a **des signes d'usure** sur le harnais 5 points et les cales de soutien.
5. Vérifier s'il y a des fissures ou dommages sur les boucles et les leviers.
6. Vérifier s'il y a des saletés ou débris et **des signes d'usure sur les raccords** et loquets du Splashy et du support de base.



En cas de doute concernant l'utilisation sûre de votre produit Firefly ou de risque de pièces défaillantes, cessez d'utiliser le produit et contactez notre service assistance clientèle dès que possible.

Pour toute question relative à l'entretien, veuillez consulter le site web de Firefly **www.fireflyfriends.com** ou contacter Firefly par e-mail à l'adresse **enquiries@fireflyfriends.com**

SECTION 07: Recommandations importantes

S'assurer que le Splashy est posé en toute sécurité dans la baignoire. Incliner le dossier dans la position intermédiaire pour des enfants capables d'aider au transfert ou qui sont soulevés dans la baignoire. Reportez-vous à la Section 09.5.

La position totalement inclinée doit être utilisée pour des enfants qui seront hissés dans la baignoire. Cela devrait faciliter le transfert dans le Splashy.

Nous vous conseillons de fixer le harnais 5 points et les cales de soutien sur le Splashy avant de placer l'enfant dans le siège, mais leur réglage peut être effectué, si nécessaire, quand l'enfant est dans la baignoire. Veuillez faire preuve de prudence et surveiller de près votre enfant pendant les modifications apportées au siège de bain.

Soulever un enfant pour le mettre dans la baignoire ou l'en extraire est une opération susceptible de faire mal au dos. Nous vous **recommandons de demander l'avis de votre thérapeute** concernant les transferts sûrs (techniques de manipulation et de déplacement) de votre enfant dans et hors de la baignoire.

SECTION 08: Réutilisation des produits Firefly






S'assurer que le produit a été minutieusement nettoyé, en respectant les consignes de la Section 5 de ce manuel. S'assurer qu'un exemplaire du manuel d'utilisation est fourni avec le produit. En cas de doute concernant l'utilisation sûre de votre produit Firefly ou de risque de pièces défectueuses, cessez d'utiliser le produit et contactez notre service assistance clientèle dès que possible au 0800 318265 (R.-U.) ou 1800 626020 (Irlande).

SECTION 09: Instructions d'utilisation

09.1 Pièces du Splashy



Le socle du Splashy doit être utilisé sous la supervision directe d'un adulte.

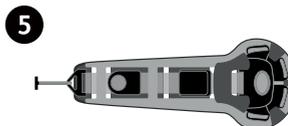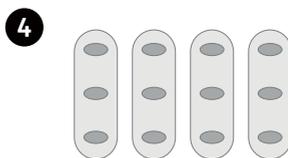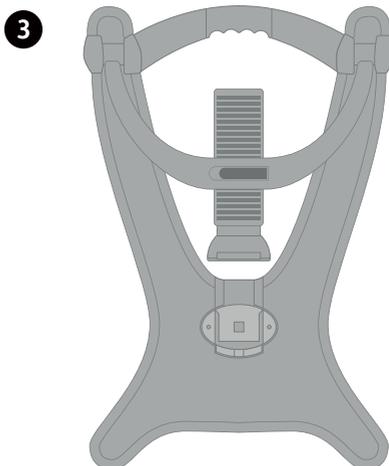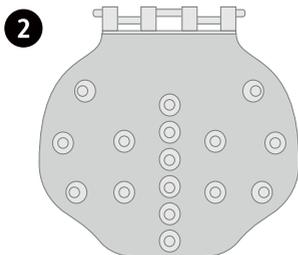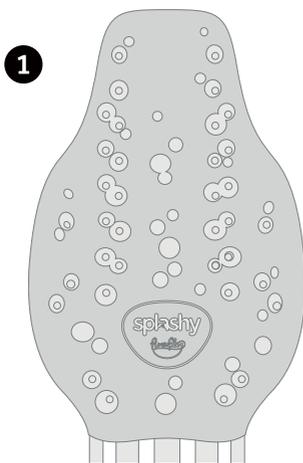

Votre Splashy est livré avec les pièces suivantes :


- 1 1x dossier
- 2 1x assise
- 3 1x Support de base
- 4 4x cales de soutien
- 5 1x sangle d'aine et 4x sangles de harnais

09.2 Assemblage du Splashy

- Nous vous recommandons fortement de procéder à une « série d'essais » avec votre enfant portant des vêtements légers dans le Splashy afin de vérifier le placement correct du harnais et des cales de soutien.
- S'assurer que la baignoire est propre et exempte de tout résidu avant de placer le support de base à l'intérieur.
- Le Splashy **DOIT** être assemblé **AVANT** de remplir d'eau la baignoire. Nous vous recommandons de remplir la baignoire d'eau tiède pour éviter d'endommager le Splashy.
- Voir la Section 09.5 pour en savoir plus sur le mode de positionnement du bras d'inclinaison sur le Splashy.

09.2.1 Placement du support de base


Le support de base doit toujours être placé sur une surface ferme et stable. Lors du placement du support de base sur la surface choisie, il est vital que tous les pieds en caoutchouc soient en contact avec la surface.

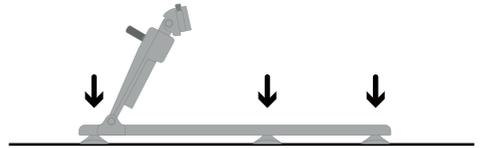

Les pieds en caoutchouc doivent être réglés pour faciliter le placement dans des baignoires incurvées. Pour cela, tourner les pieds dans le sens horaire ou anti-horaire en fonction du réglage requis.




Les pieds en caoutchouc peuvent être déplacés dans la partie la plus étroite du support de base en fonction de la largeur de la baignoire. Vous devez vous assurer qu'ils sont parfaitement parallèles. 4 ou 6 pieds apportent une bonne stabilité.

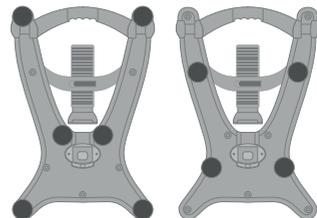

Suite →

09.2.1 Placement du support de base


Dès que le support de base est en place, s'assurer que le bras d'inclinaison est réglé sur sa position la plus haute.

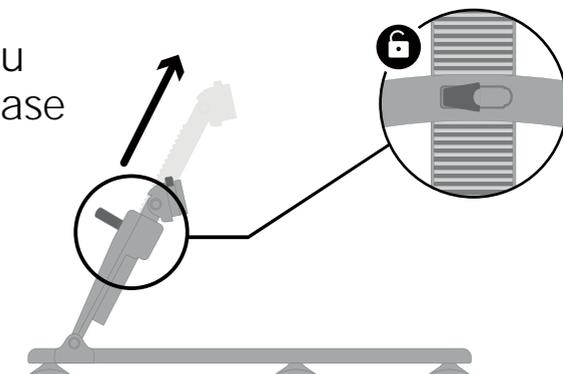

09.2.2 Assemblage du siège Splashy

1


Avant d'attacher le Splashy au support de base, il est nécessaire d'assembler le dossier et l'assise.

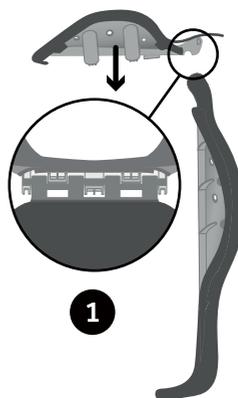

2


Maintenir d'une main le dossier de Splashy à la verticale, avec les rainures en haut. De l'autre main, faire coulisser l'assise dans les rainures du dossier.

Basculer l'assise dans l'autre sens pour enclencher les raccords. Le raccordement effectué, insérer le rabat en mousse de la charnière sous la housse en mousse du dossier.

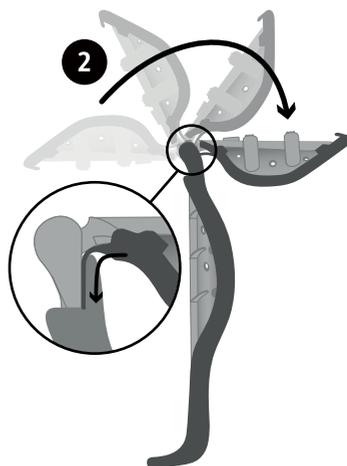


09.2.3 Fixation et configuration du harnais et des cales


- 1 Pour fixer les sangles et les cales de soutien sur l'assise et le dossier du Splashy, placer le levier approprié dans le trou.
- 2 Bloquer en tournant le levier sur le côté, sous le siège.

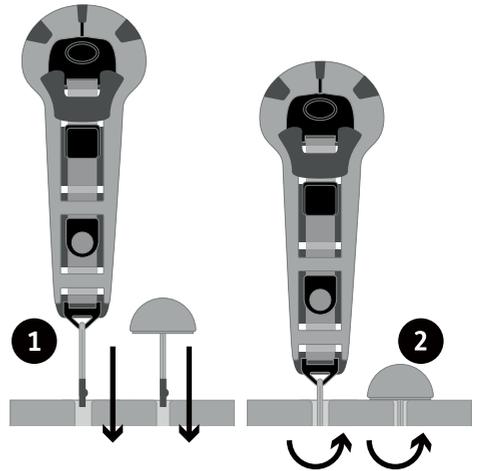

Pour fixer les sangles d'épaule et latérales, suivre le schéma.


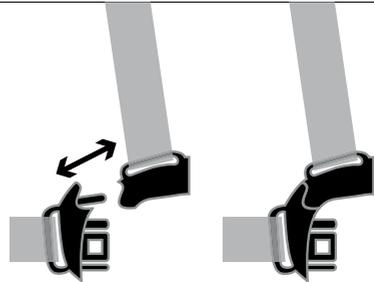


Pour savoir si les sangles sont placées du bon côté du Splashy, la boucle doit apparaître comme dans l'illustration.

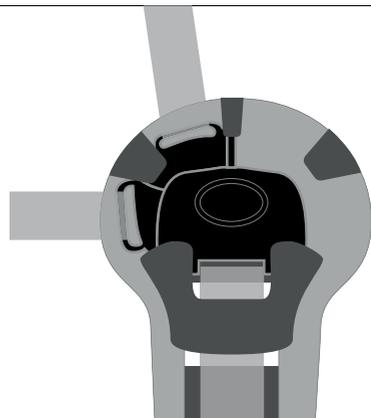

09.2.4 Configuration du harnais 5 points


- 1 Insérer le levier de la sangle d'aine dans l'assise du Splashy.
- 2 Insérer le levier de la sangle d'épaule gauche dans le trou, à la bonne hauteur pour votre enfant.
- 3 Insérer le levier de la sangle latérale gauche dans un trou sur les côtés du dossier.
- 4 Répéter le processus pour les sangles latérale et d'épaule droite.
- 5 Dès que toutes les sangles sont fermement en place, relier toutes les sangles entre elles à l'aide de la boucle pour former un harnais 5 points.
- 6 Les sangles peuvent être entièrement ajustées en relâchant la bride, pour les serrer davantage ou les rendre plus lâches selon les besoins. Veiller à bloquer la bride dès que la sangle a été ajustée.

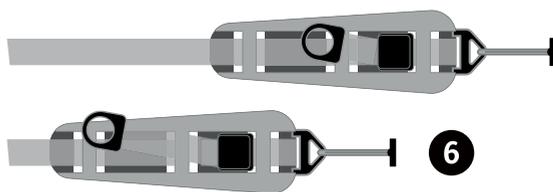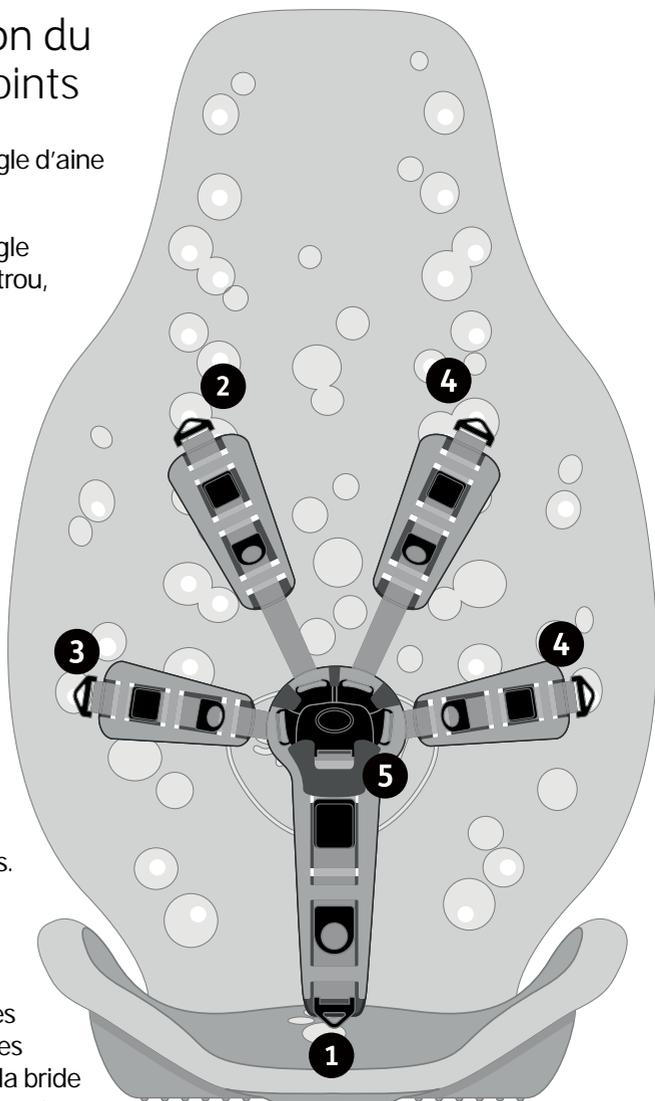

Astuce - Lorsque vous êtes satisfait du réglage, vous pouvez enfilez le reste de la sangle dans la partie en mousse du harnais pour qu'elle ne gêne pas

09.2.5 Configuration du harnais 3 points


- 1** Insérer le levier de la sangle latérale gauche dans un trou sur les côtés du dossier.
- 2** Répéter le processus pour la sangle latérale droite.
- 3** Dès que toutes les sangles sont fermement en place, relier toutes les sangles entre elles à l'aide de la boucle pour former un harnais 3 points.

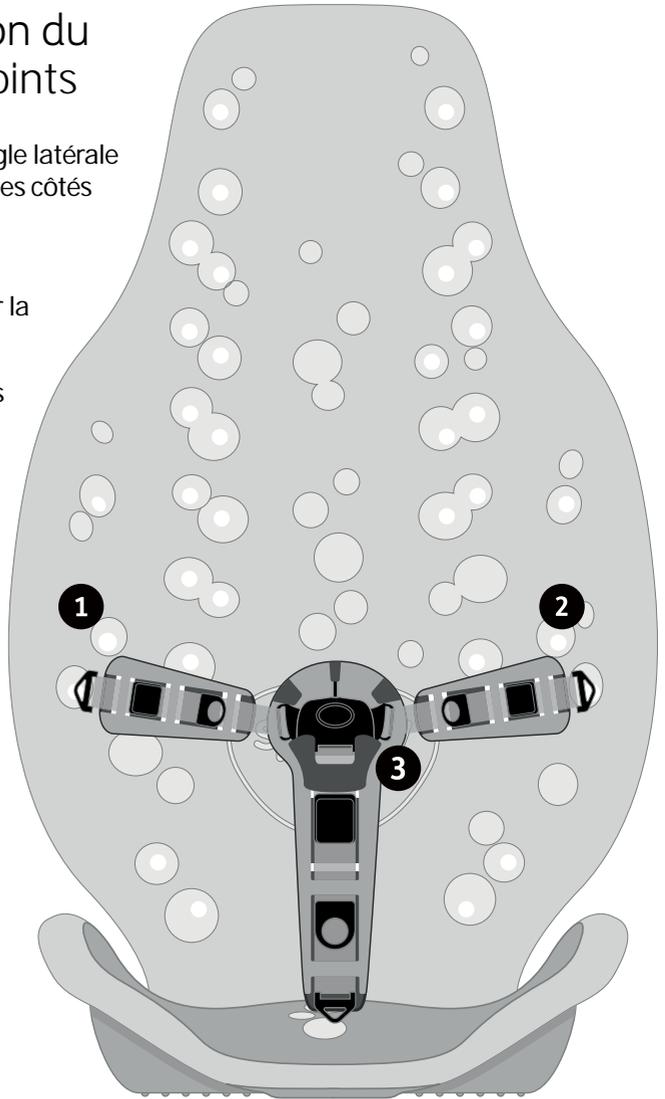


Ne pas passer d'une configuration de harnais 5 points à celle d'un harnais 3 points quand l'enfant est installé dans le siège de bain.

09.2.6 Montage du siège Splashy sur le support de base

- 1** Abaisser le Splashy, avec l'assise à plat sur le support de base.
- 2** Tout en centrant l'assise sur le support de base, la déplacer vers l'avant de façon à ce qu'elle coulisse dans la glissière de verrouillage.
- 3** Un clic sonore signale quand l'assise est fermement fixée au support de base et bien bloquée.

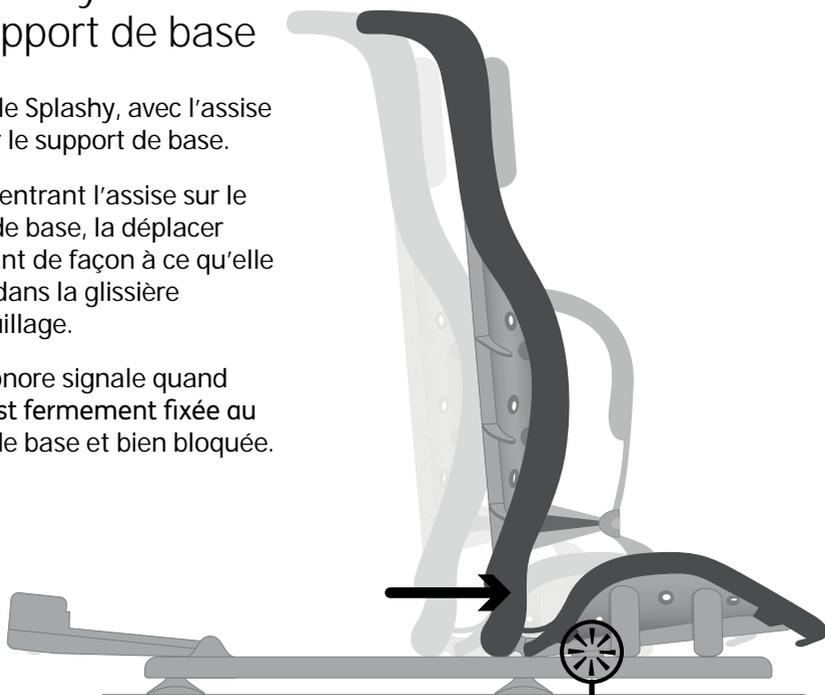


Un clic sonore signale l'enclenchement de l'assise et du dossier dans le support de base.

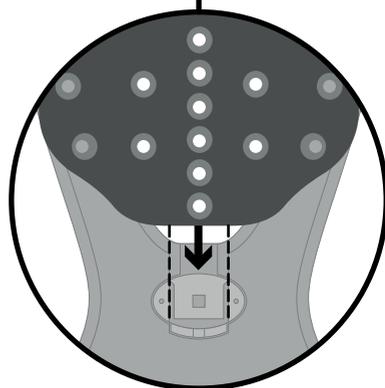

Avant d'attacher le bras d'inclinaison sur le dossier, vérifier qu'il est dans sa position la plus haute.


En maintenant le Splashy d'une main, appuyer de l'autre main sur le bouton indiqué pour insérer l'accessoire dans la fente du dossier.

Un clic sonore signale qu'il est correctement attaché.

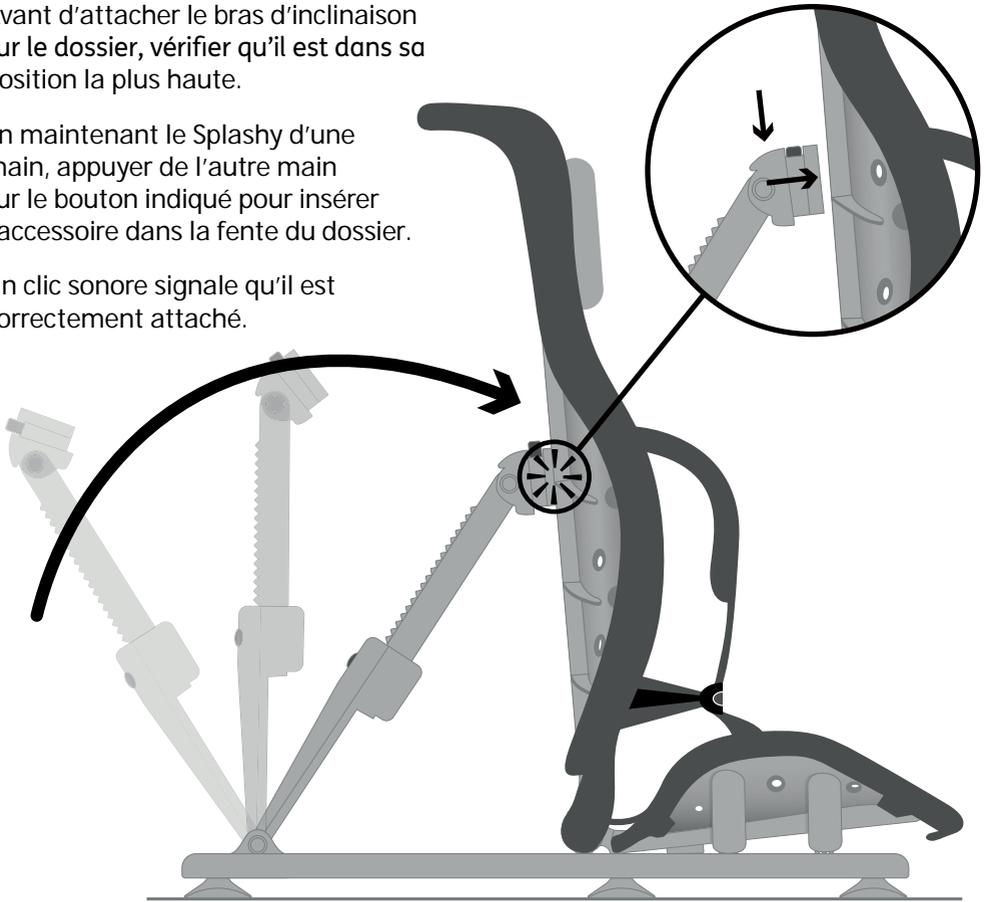

Cette illustration montre à quoi doit ressembler le siège de bain lorsqu'il est complètement assemblé.

L'installation de votre enfant dans le Splashy peut alors s'effectuer en toute sécurité.

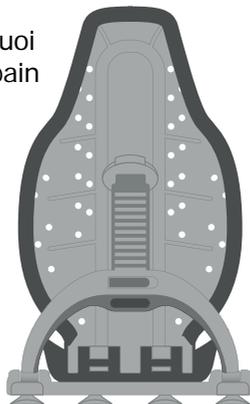


09.3 Cales de soutien

Dès que votre enfant est fermement maintenu dans le Splashy à l'aide du harnais, vous pouvez ensuite placer les cales pour renforcer le soutien.

Dans cette illustration, les cales sont utilisées comme repose-tête, mais elles peuvent également servir de pommeau, de support anti-glissement et/ou de guide pour les jambes.

Si vous pensez que votre enfant a besoin d'un soutien renforcé dans le Splashy, vous pouvez acheter des cales supplémentaires en vous rendant dans la section Accessoires du site web de Firefly.

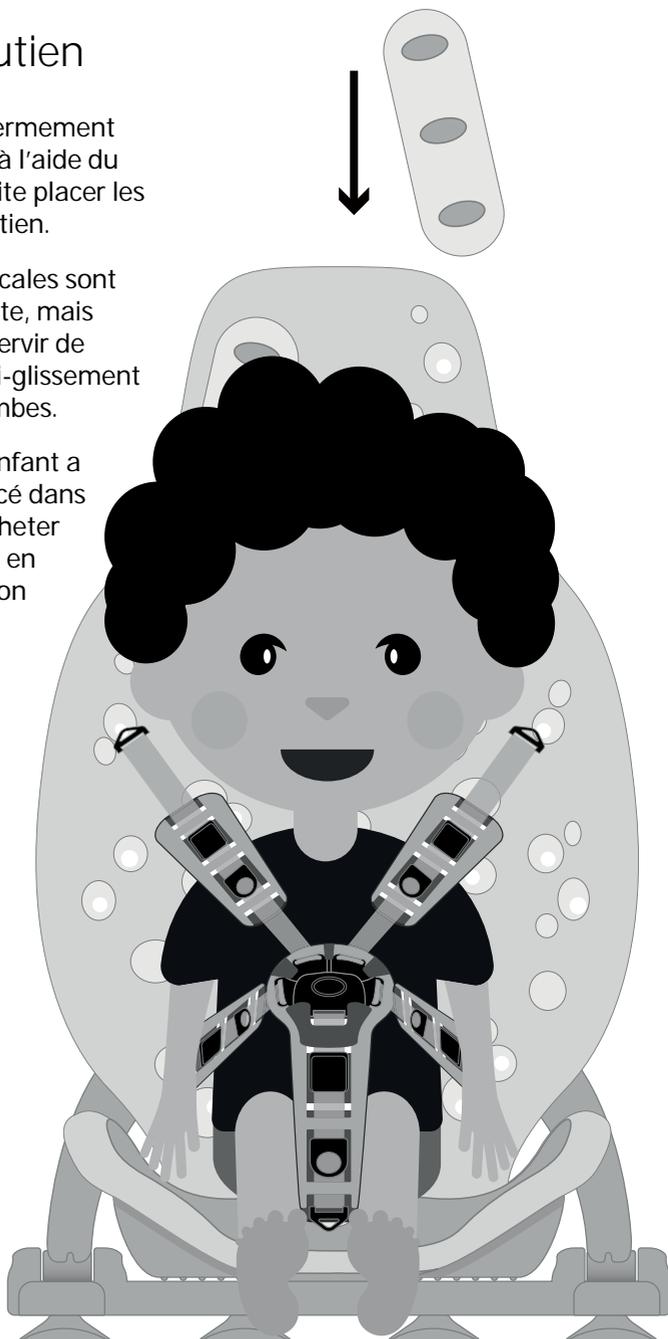


09.3.1 Réglage des cales pour fournir un soutien à divers endroits

Les cales peuvent servir de:

1. Supports de tête - placer une cale du côté droit et gauche de la tête de votre enfant.

2. Support de nuque - placer une cale latéralement à la nuque de votre enfant.

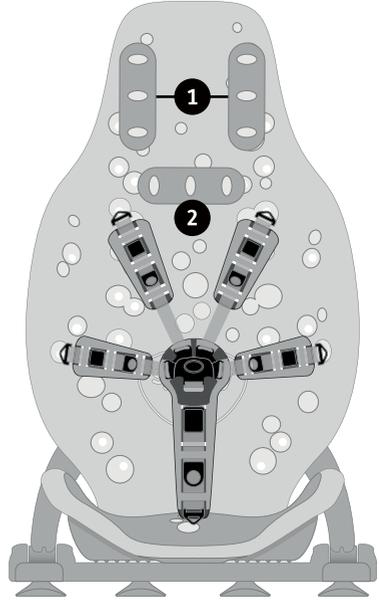


3. Pommeau - placer une cale entre les jambes de votre enfant (permet d'éviter le croisement).


4. Guides de jambe - placer une cale du côté droit et gauche des jambes de votre enfant (permet d'éviter qu'il ne tombe sur le côté du siège de bain).

5. Soutien anti-glissement - placer une cale latéralement à la base du siège de bain, devant le postérieur de votre enfant (permet d'éviter que le postérieur de votre enfant ne glisse vers l'avant du siège). La position assise dans le Splashy peut être plus confortable pour certains enfants si une cale est placée devant la sangle d'aine.


3

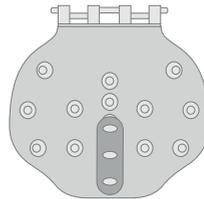

4

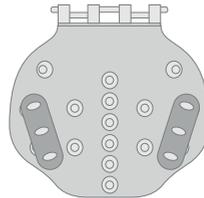


5

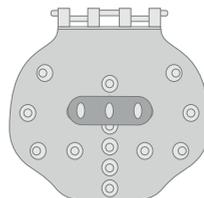

09.4 Réglage du harnais pour le lavage

Enlever une sangle d'épaule pour en faire un harnais 4 points et faciliter l'accès pour le lavage.

Pour enlever la sangle d'épaule, dégager le levier de l'arrière du dossier.

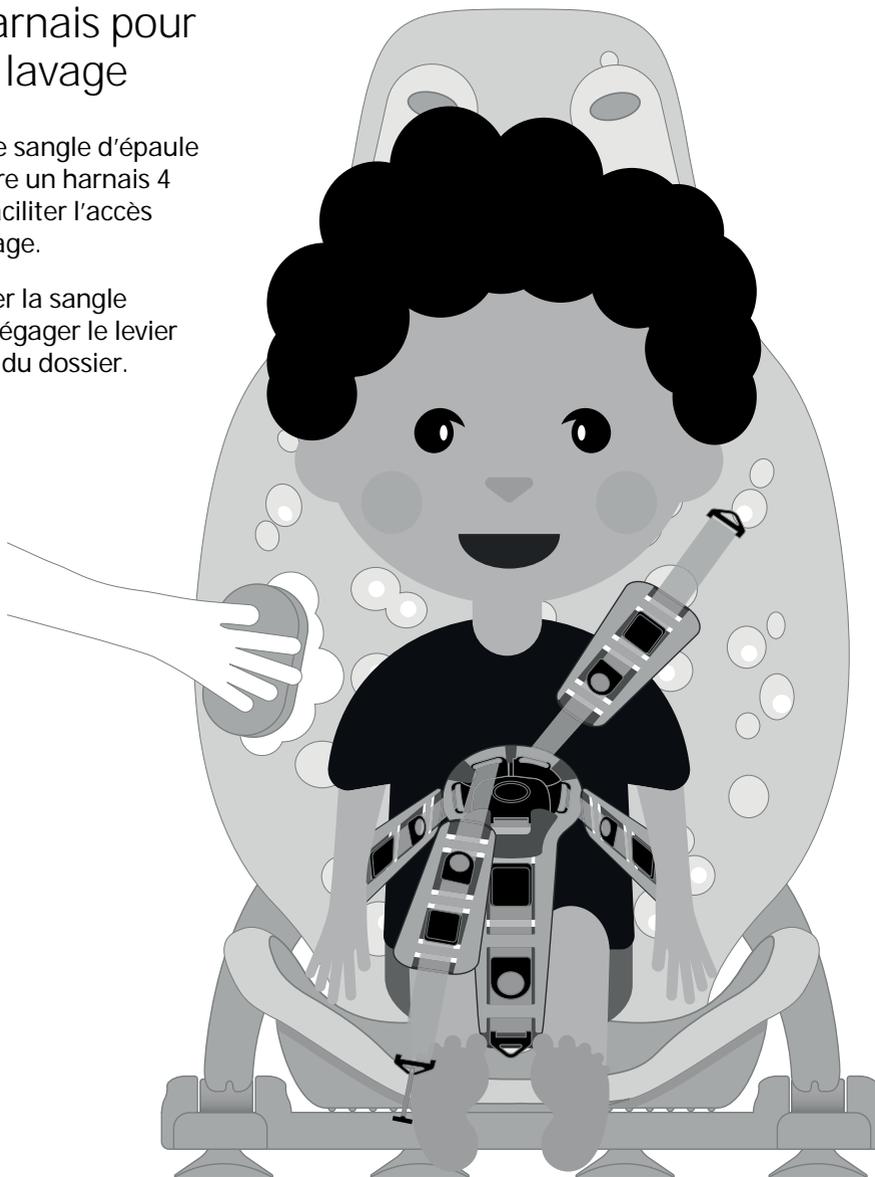


Enlever une sangle latérale pour en faire un harnais 4 points et faciliter l'accès pour le lavage de la partie inférieure.

Pour enlever la sangle latérale, dégager le levier de l'arrière du dossier.



09.5 Raccourcissement des sangles d'épaule et latérale

Dans certains cas, il peut être nécessaire de réduire la longueur des sangles d'épaule et latérale pour installer un enfant plus petit dans le Splashy.

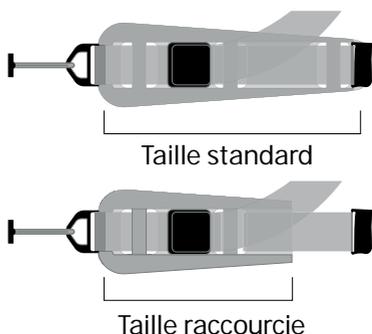


1 Lors de la livraison du Splashy, les sangles sont réglées comme indiqué sur le schéma. Pour ajuster les sangles à la taille d'un enfant plus petit, veuillez suivre ces instructions.




2 Enlever la section indiquée de la sangle de la mousse.




3 Rabattre en arrière le bout plus mince de la mousse et s'assurer que les ouvertures sont alignées.

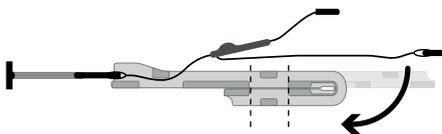

4 Faire passer les sangles dans la première ouverture de la mousse repliée.

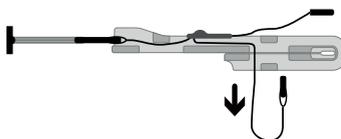


5 Après les avoir fait passer complètement, introduire dans la seconde ouverture et tirer pour serrer.

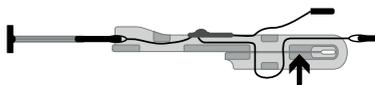


09.5.1 Raccourcissement de la sangle d'aine

Dans certains cas, il peut être nécessaire de réduire la longueur de la sangle d'aine pour installer un enfant plus petit dans le Splashy.

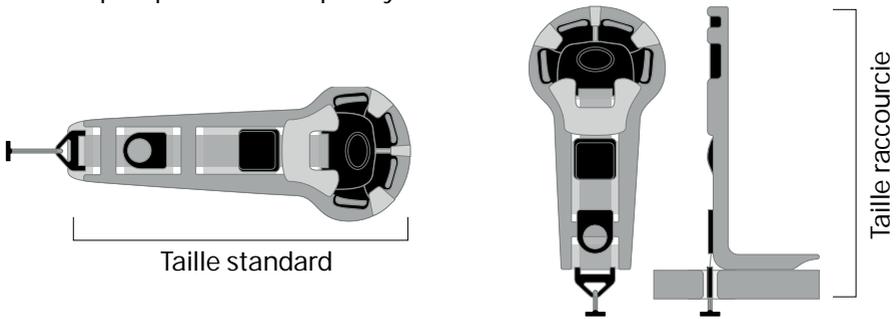

- 1** À la livraison, la sangle d'aine ressemble au schéma présenté. Pour ajuster les sangles à la taille d'un enfant plus petit, veuillez suivre ces instructions.
- 2** Enlever la section indiquée de la sangle de la mousse.
- 3** Rabattre en arrière la mousse pour obtenir une sangle d'aine plus courte et refaire passer le levier dans le trou de l'assise.

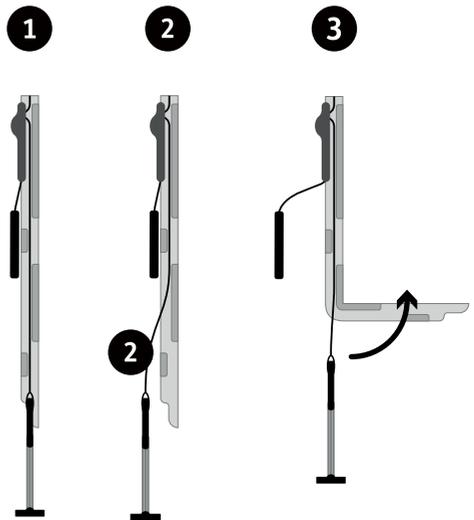

09.6 Positions d'inclinaison recommandées

Position verticale - si votre enfant a une bonne tolérance en position assise et un bon contrôle du tronc, il peut être capable de supporter une position assise droite.



Position inclinée - nous recommandons de placer le Splashy dans la position inclinée si votre enfant doit être soulevé dans le siège de bain.



Position horizontale - nous recommandons de placer le Splashy dans la position horizontale pour faciliter le transfert si votre enfant est hissé dans le siège de bain.




09.6.1 Utilisation de la fonction inclinaison du Splashy

La fonction inclinaison du Splashy peut être utilisée dès que votre enfant est maintenu en toute sécurité.


Faire preuve de prudence en modifiant l'angle d'inclinaison. Vous devez effectuer ce mouvement le plus doucement possible afin de réduire l'anxiété de l'enfant.

Pour mettre le Splashy dans une position plus verticale, le maintenir en plaçant une main sur la poignée du Splashy, **A** en haut du dossier, et l'autre main sur le clip vert du bras d'inclinaison du support de base. **B**

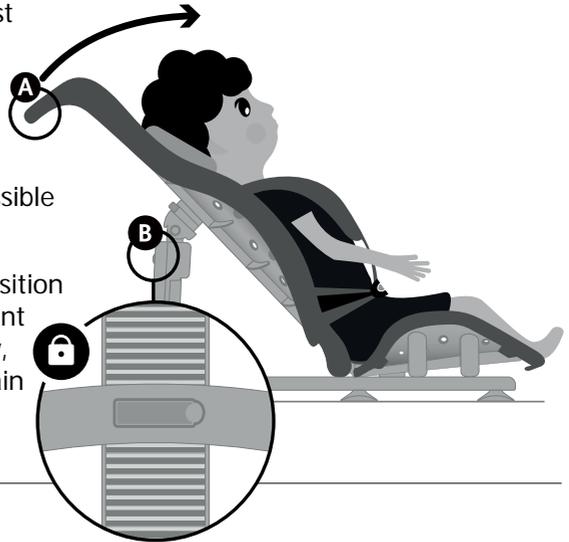

Relâcher le clip et mettre le siège de bain dans une position verticale convenant à votre enfant. **A**

Fixer le clip sur le support de base. Un clic sonore signale quand il est bien enclenché.

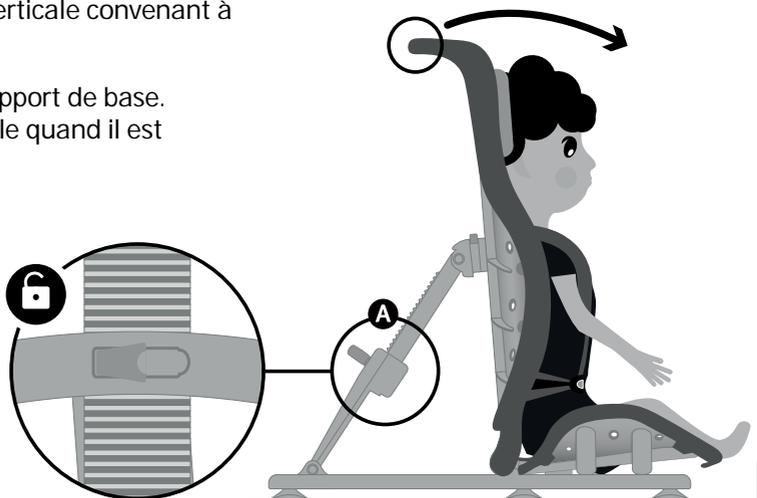

09.7 Enlèvement du Splashy de la baignoire et démontage après utilisation


Ne pas enlever le Splashy de la baignoire avant d'avoir dégagé l'assise et le support de base car cela pourrait mettre à rude épreuve les raccords.

Détacher et enlever l'enfant du Splashy et vider la baignoire.





Voir la Section 7 pour les conseils sur la façon de le faire en toute sécurité.

Pour dégager le Splashy du support de base, appuyer sur le bouton vert du bras d'inclinaison et tirer le dossier vers l'avant.

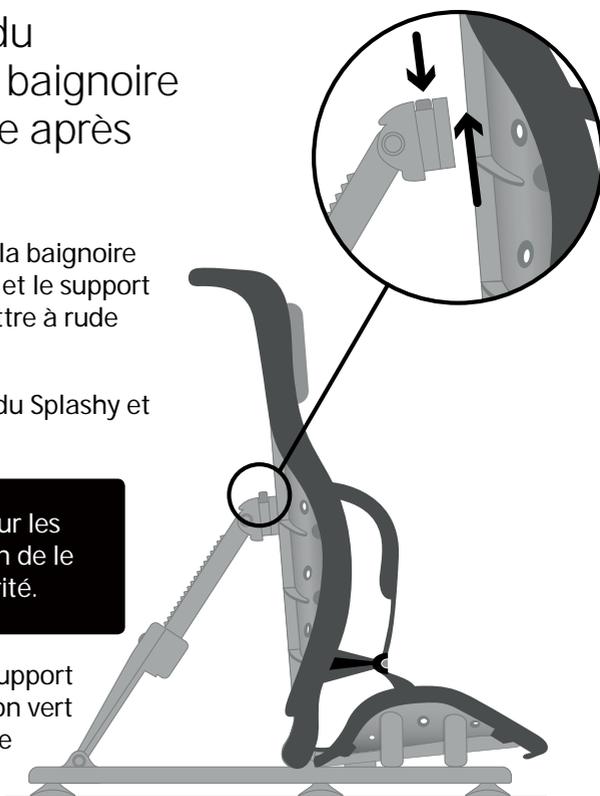


Pour dégager l'assise, tirer sur la languette verte en plastique **A**, faire coulisser vers l'arrière, puis soulever le Splashy pour l'extraire du support de base. **B**

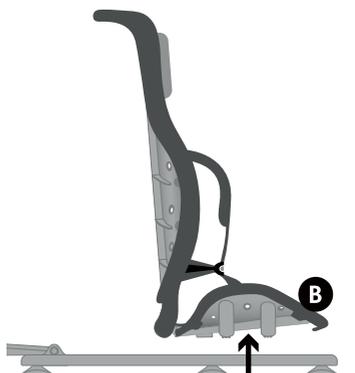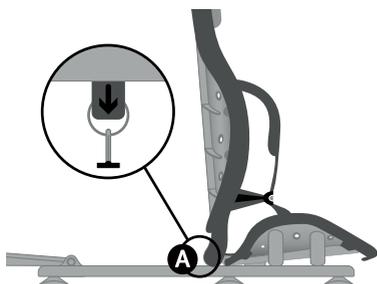


Ne pas forcer pour enlever l'armature de la baignoire car cela pourrait mettre à rude épreuve les raccords.

Pour enlever le support de base de la baignoire, glisser doucement la main sous les pieds en caoutchouc et ils se dégageront. **(ne pas utiliser d'outils)**

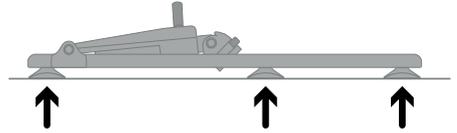

Placer le Splashy sur le côté et détacher l'assise du dossier en la renversant pour dégager le mécanisme à charnière.

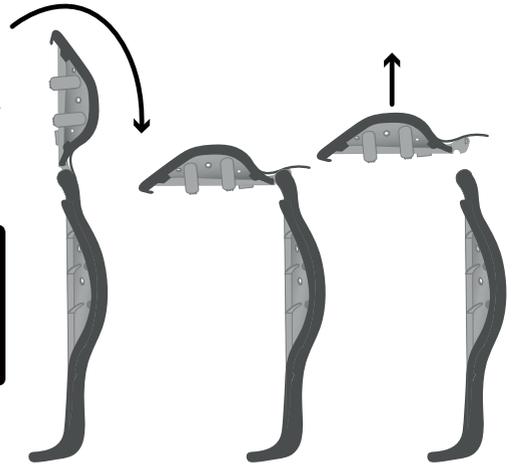

Le non-respect de ces instructions peut annuler la garantie.

09.8 Égouttage et séchage

Toujours veiller à essuyer/laver le Splashy avant de le laisser sécher et de le ranger.


Le support de base peut être simplement essuyé. (Reportez-vous à la Section 05 pour de plus amples indications.)

Pour le séchage, il peut être plus facile de sauter la dernière étape de la section 09.6 et de garder l'assise, le dossier et le support de base du siège en une seule pièce, comme dans l'exemple ci-dessous.




Pour ranger le support de base lorsqu'il ne sert pas, abaisser le bras d'inclinaison dans sa position la plus basse et poser à plat comme indiqué à l'étape 2 ci-dessous.


Pour dégager le siège, appuyer sur le bouton vert du bras d'inclinaison et tirer le dossier vers l'avant.

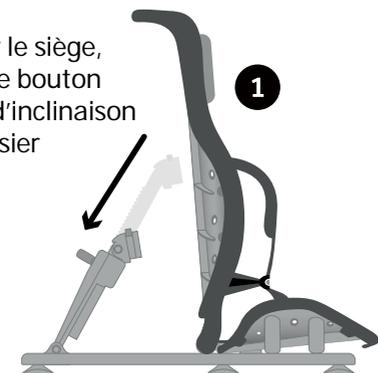

Replier le bras d'inclinaison vers l'avant comme indiqué par la flèche.

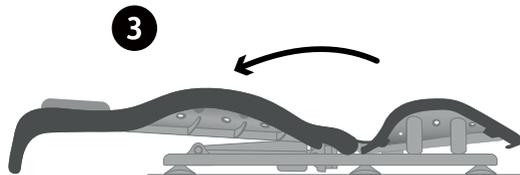


Rabattre le dossier sur le support de base comme illustré.

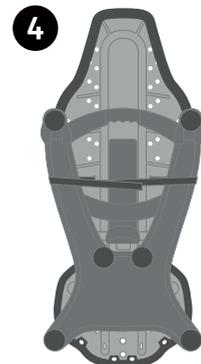


Utiliser les bandes Velcro pour maintenir le support de base à plat contre le siège Splashy.

09.9: Pieds d'extérieur du support de base

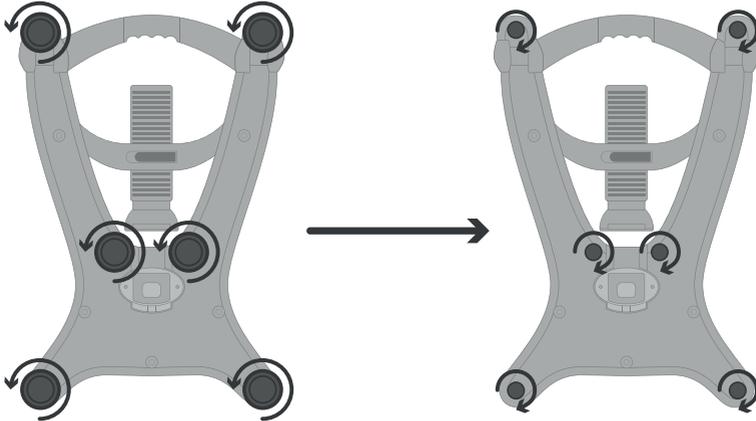

1 Enlever les 6 pieds à ventouse du support de base.

2 Placer les pieds d'extérieur en les vissant dans le sens horaire.

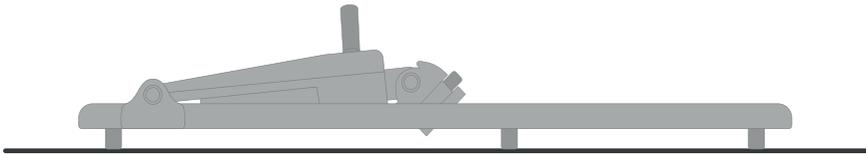

3 Vérifier que tous les pieds sont bien engagés et que le support de base est posé à plat.



Ne pas utiliser les pieds d'extérieur dans la baignoire/douche. Veuillez utiliser les pieds à ventouse d'origine du support de base.

10: Informations sur la taille

Informations techniques sur le siège de bain Splashy	
Hauteur de dossier	610mm
Largeur de dossier	385mm
Profondeur d'assise	300mm
Largeur d'assise	350mm
Largeur du support de base	420mm
Hauteur du support de base	630mm
Poids maximum	30kg
Tranche d'âge	1-8 years ans



Firefly Friends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

(+44) 28 9267 8879
hello@fireflyfriends.com

LS591-04

fireflyfriends.com

