

80 kg/m<sup>3</sup>  
Mousse viscoélastique à mémoire de forme moulée

### DESRIPTIF

Talonnière moulée en mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m<sup>2</sup>

### MODÈLE DISPONIBLE



Talonnière enveloppante

MODÈLE	REF	Longueur	Largeur	Hauteur
Talonnière enveloppante (livrée avec housse)	P901T1HW	55 cm	25 cm	7,5 cm

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE

Entretien housses POLYMAILLE®



### PROPRIÉTÉS DE LA HOUSSE

#### TISSU ENDUIT DE POLYURÉTHANE BI-EXTENSIBLE :


- Anallergique et traité antibactérien, antimicrobien, antifongique.
- Lutte contre les frictions et cisaillements.
- Souple et doux au toucher (confort).
- Favorise les échanges gazeux (vapeur d'eau, sudation) et lutte ainsi contre la macération.
- Imperméabilisé : hygiène maîtrisée et durabilité du support accrue.
- Lavables jusqu'à 90°C, décontamination par produits de pulvérisation à froid.
- Traitement d'ignifugation.
- En usage multi-patients, il est souhaitable d'acquérir une nouvelle housse par patient.

- Contrairement à la plupart des coussins se fixant à l'aide de sangles ou velcros s'avérant peu confortable à l'utilisation de par les frictions et irritations engendrées, les produits de la gamme positionnement SYST'AM® sont intégralement housés et dotés d'un système de fixation particulièrement confortable et aisé à régler :
  - le système de fixation procure un maintien durable en position.
  - dispositif facile à mettre en place pour l'aidant.



### EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE À MÉMOIRE DE FORME

→ Permet l'enfoncement du talon au sein de la matière, ce qui combiné au galbe du dispositif, procure un abaissement des pics de pressions en regard des zones à risque d'escarres.

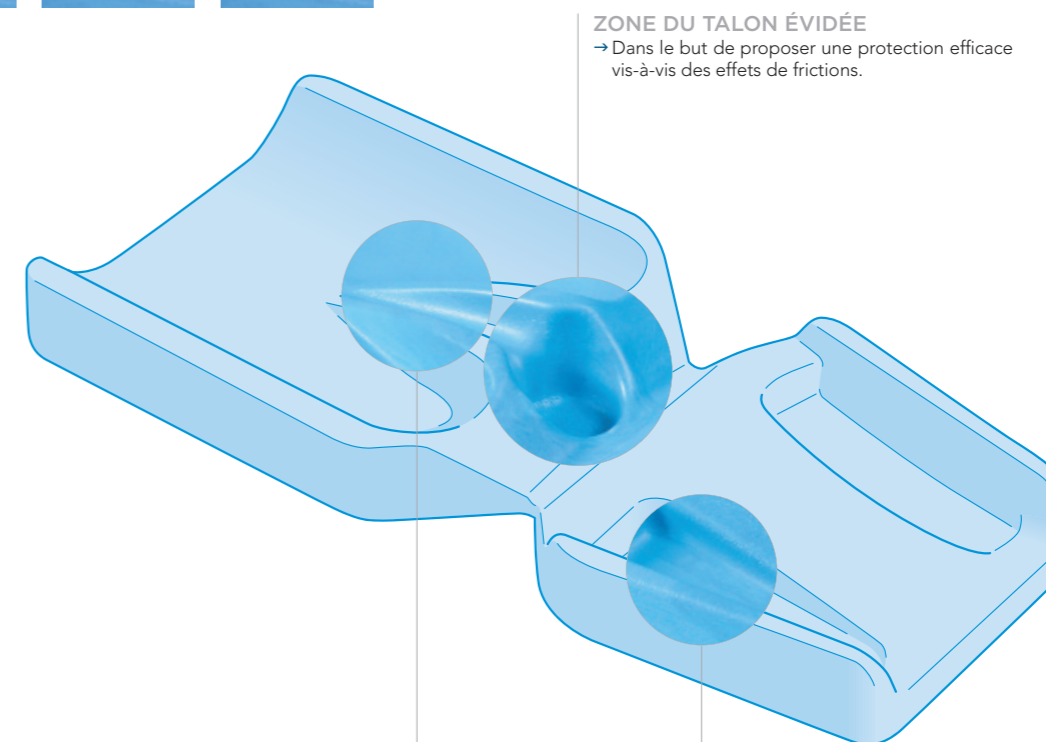

#### ZONE DU TALON ÉVIDÉE

→ Dans le but de proposer une protection efficace vis-à-vis des effets de frictions.

#### TENDON D'ACHILLE PROTÉGÉ PAR DES RENFORTS LATÉRAUX

→ Afin de diriger les pressions vers les zones rétomalléolaires considérées comme à moindre risque.

#### BORDS LATÉRAUX DE L'AVANT-PIED ÉVIDÉS

→ Pour reporter les points d'appuis vers les zones alentours à plus faible prévalence d'escarre.



#### ENVELOPPANTE ET SOLIDAIRE DU PIED

→ Indiquée pour les patients à mobilité normale ou faiblement limitée, elle assure une diminution des effets de frictions engendrés, source d'escarres entre le couchage et le talon.  
→ Tout à fait adaptée pour les sujets connaissant une agitation ou des mouvements permanents des membres inférieurs.

